


Приобрести наддверный блочный тренажер MediQ 24320 можно на сайте <https://medik-dom.ru>



# Наддверный блочный тренажер

24320

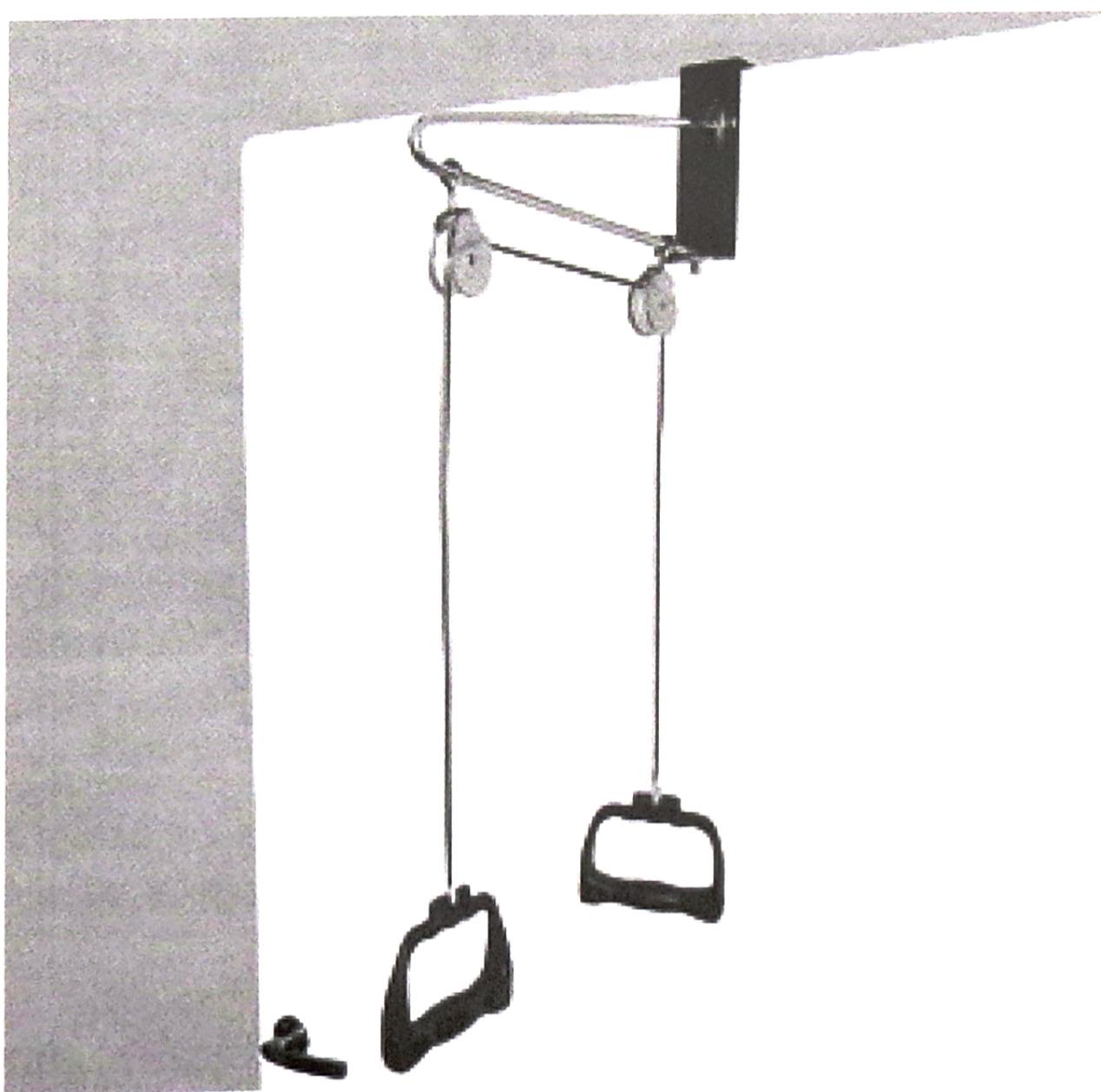

Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	4
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Информационное письмо.....	7


Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик наддверного блочного тренажера 24320

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Наддверный блочный тренажер 24320 предназначен для профилактики контрактур суставов, для тренировки верхних конечностей, мышц плечевого пояса после перенесенных заболеваний.

### 1.2 Технические характеристики

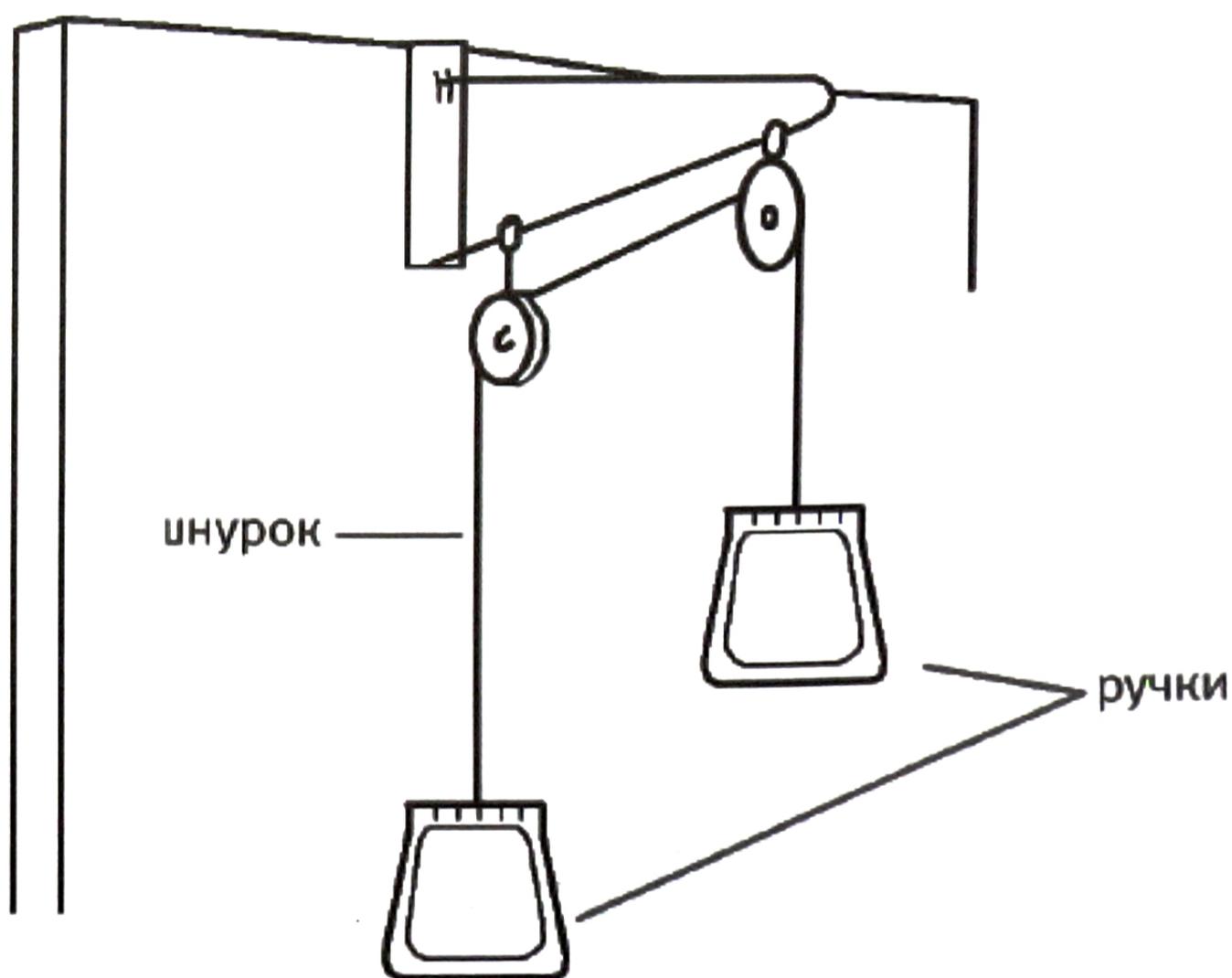

цвет	синий
материал	оцинкованная сталь, пластмасса, резина, полиэстер
размеры	варьируются
габариты упаковки (см)	39x18x9
вес изделия (кг)	0,9

### 1.3 Упаковка

Комплектация: блочный тренажер, состоящий из наддверного кронштейна, шнура, двух ручек и двух металлических роликов.

## 2. использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части изделия на наличие трещин!

Использовать только по назначению лечащего врача.

Люди с ограниченными физическими возможностями не должны пользоваться данным изделием без помощи сопровождающего лица.

### 2.2 Порядок работы

Для эксплуатации блочного тренажера необходима дверь толщиной 2,5 - 4 см и крепкий, устойчивый стул.

- 1) Закрепите кронштейн на верхней части двери
- 2) Присоедините шнурок к ручкам и протяните шнурок через ролики. Другой конец, дальний от двери, закрепите по центру продольной балки.
- 3) Усадите пользователя под блочным тренажером. Можно начинать упражнение на руки.

## 3. техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить сухой тряпкой. При попадании воды, тщательно высушите поверхность.

#### 4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

Наддверный блочный тренажер 24320  
Производитель: Valentine International ltd, Китай.